



MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT

FUT 2

MTHFR

MATÉRIEL

Pour réaliser ce prélèvement, nous vous fournissons :

- 1 écouvillon.
- 1 tube à bouchon bleu.


⚠ IMPORTANT

Le tube ne peut pas être rincé.

Il contient du thiocyanate de guanidinium indispensable à l'analyse.

- Ne pas manger, boire fumer ou mâcher du chewing-gum 30 minutes avant de prélever l'échantillon de salive.

ÉTAPE 1

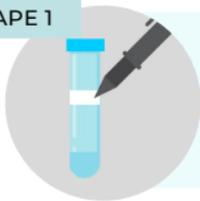

Notez sur l'étiquette du tube fourni votre nom, prénom et l'heure de prélèvement.

ÉTAPE 2




Lavez-vous soigneusement les mains.

ÉTAPE 3



Ouvrez l'emballage stérile et sortez l'écouvillon. Veillez à ne pas toucher l'extrémité de l'écouvillon avec vos doigts.

ÉTAPE 4

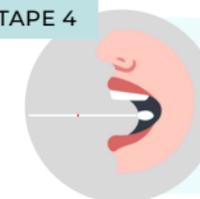

Introduisez l'écouvillon dans votre bouche et frottez l'intérieur de vos joues pendant 1 à 2 minutes.

ÉTAPE 5



Transférez l'écouvillon dans le tube et cassez la tige de l'écouvillon au niveau du trait rouge.

ÉTAPE 6



Fermez hermétiquement le tube et placez-le dans le sachet prévu à cet effet. N'oubliez pas de joindre la déclaration de consentement à vos prélèvements.